



mindray
healthcare within reach

WATO EX-65 NUEVA
Estación de trabajo optimizada para anestesia

 +52 5530479296

 ventas@meditecjg.com

 www.meditecjg.com

Desde 2006, Mindray ha instalado exitosamente más de 10 000 máquinas de anestesia para clientes de todo el mundo. Mindray se enorgullece enormemente de las opiniones recogidas por nuestras bases internacionales, que han mani estado un sorprendente nivel de satisfacción de cliente.

Durante los últimos diez años, Mindray ha trabajado continuamente de cerca con médicos de todo el mundo para reconocer y comprender los desafíos clínicos que ellos enfrentan todos los días, y los ha ayudado a resolverlos poniendo a su alcance soluciones intuitivas e innovadoras. Con este objetivo en mente, Mindray se enorgullece de presentar la nueva estación de trabajo optimizada para anestesia WATO EX-65.

WATO EX-65

NUEVO

Estación de trabajo optimizada para anestesia



Más poderosa

La nueva WATO EX-65 lleva la reconocida y completa estación de trabajo para anestesia a un nuevo nivel de efectividad y rendimiento.

Equipada con la más inteligente tecnología del ventilador y capacidades de control mejoradas, la nueva WATO EX-65 permite el control y soporte de distintos modos de ventilación, entre ellos, PCV-VG, SIMV-VG, PSV (+ asistencia en caso de apnea) y muchas otras funciones para resolver las necesidades de todos sus pacientes.

El nuevo software de cálculo de agentes anestésicos y la nueva interfaz del usuario intuitiva le permiten al usuario ajustar el modo de ventilación de forma eficiente y controlar el uso de agentes anestésicos costosos, lo que permite reducir los costos relacionados.

Más integrada

La nueva WATO EX-65 tiene un diseño que permite ahorrar espacio con más funcionalidad.

El módulo multigas tipo Plug-and-Play brinda un completo análisis respiración a respiración de FiO_2 , EtO_2 , CO_2 , NQ y permite la autoidentificación de BIS y de 5 agentes anestésicos.


El sistema opcional de aspiración del paciente se integra para su mayor comodidad.

Más fácil de usar

Con una pantalla completamente táctil a color de 12,1", la interfaz del usuario de uso sencillo permite tomar decisiones basadas en la información que ofrecen los datos gráficos y numéricos mostrados con total claridad. La nueva estructura sencilla del menú reduce la interacción requerida para modificar el control y los parámetros, lo que le permite optimizar su flujo de trabajo.



Más poderosa

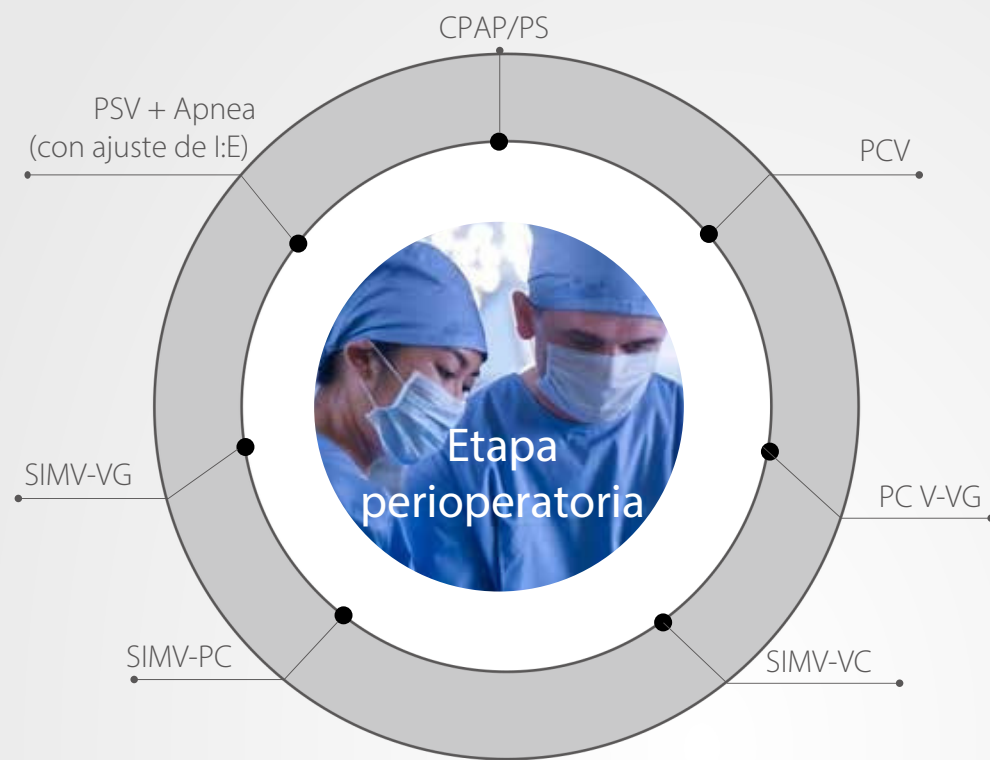

Ventilador más inteligente

La nueva WATO EX-65 presenta un ventilador más inteligente con una completa gama de control y soporte de modos de ventilación, que incluye modos completamente nuevos:

- VCV
- PCV
- PC V-VG
- SIMV-VC
- SIMV-PC
- SIMV-VG PSV + Apnea (con ajuste de I:E)
- CPAP/PS

Los modernos ventiladores de anestesia ofrecen una gran variedad de modos de ventilación, que permiten la asistencia respiratoria compleja de pacientes en estado crítico. Y el ventilador de la nueva WATO EX-65 tiene modos únicos de garantía de volumen que le brindan al paciente el volumen total deseado en los modos PCV y SIMV.

El modo PCV-VG le brinda al paciente el volumen corriente deseado y le ofrece los beneficios de PCV con la más baja presión inspiratoria para todas las respiraciones y mejor oxigenación, además de la seguridad de un volumen corriente uniforme.

SIMV-VG ofrece una tasa establecida de respiraciones de presión controlada con un volumen garantizado para el paciente, que puede respirar espontáneamente entre las respiraciones obligatorias. El soporte de presión se puede usar para dar apoyo a las respiraciones espontáneas.



Medición de AA

El nuevo software para cálculo de agentes anestésicos le permite al usuario controlar el consumo del agente en tiempo real sin perder de vista su costo. Una nueva visualización del porcentaje de flujo de O₂

nuevo le permite al usuario establecer ajustes de los gases más precisos basados en la información para garantizar que el paciente se encuentre correctamente oxigenado en todo momento.



Cambio automático de gases

Para garantizar que el paciente se encuentre ventilado en todo momento, la nueva WATO EX-65 tiene una función única de cambio automático de los gases impulsados por el ventilador. En caso de que el gas impulsado por el ventilador primario se pierda, el dispositivo cambiará automáticamente a Aire (o a O₂, según la configuración del

dispositivo) sin interrupción, para que se realice la ventilación mecánica.



Sistema respiratorio calefaccionado integrado

El sistema de calefacción integrado controlado por el usuario reduce la condensación al mínimo, lo que mejora la precisión del sensor de flujo y garantiza la estabilidad del volumen corriente producido.

Los cartuchos de cal sodada descartables y reutilizables son compatibles con el circuito respiratorio.



Más integrada



Más fácil de usar



La superficie ocupada reducida de la nueva WATO EX-65 resulta ideal para los quirófanos modernos saturados de equipos. Un dispositivo que ahorra espacio sin afectar sus funciones ni su funcionalidad.

Diseño compacto, superficie ocupada reducida

Módulo multigas PnP



Con un módulo de CO₂ de ranura simple mejorado o con la capacidad del agente anestésico de ranura doble, los módulos multigas tipo Plug-and-Play brindan un análisis exhaustivo de respiración a respiración de FiO₂, EtO₂, CO₂, NO₂ y permiten la autodetección de BIS y de cinco agentes anestésicos.



El nuevo sistema integrado de aspiración del paciente (opcional) le brinda al usuario acceso inmediato a un sistema de aspiración controlado por el usuario que es cómodo y ordenado.

Aspiración integrada opcional para mejor gestión perioperatoria



Mayor posibilidad de maniobra

Para asegurarse de que su dispositivo se pueda posicionar fácilmente, la nueva WATO EX-65 se ha desarrollado con funciones que facilitan su traslado. Las mangos de fácil acceso y las grandes ruedas permiten trasladar fácilmente la nueva WATO EX-65 usando solo una mano, para luego afirmarla con seguridad en el lugar presionando solo una vez en el freno para bloqueo central.



1

Interfaz del usuario intuitiva que simplifica el flujo de trabajo

Configurado con una pantalla de alta resolución completamente táctil a color de 12,1", los usuarios pueden ver y configurar los parámetros según sea necesario. El diseño intuitivo y la estructura sencilla del menú garantizan que todos los parámetros se puedan ver de forma clara realizando solo dos pasos necesarios para ajustar el modo de ventilación.

2



3

Mesa de trabajo de gran tamaño y fácil de limpiar

La mesa de gran tamaño, lisa y fácil de limpiar brinda una superficie optimizada de trabajo donde usted puede completar todos sus documentos y puede colocar los medicamentos y los equipos de intubación en una cómoda ubicación.



+52 5530479296



ventas@meditecjg.com



www.meditecjg.com