


**mindray**

# WATO EX-30

Máquina de anestesia




**MEDITEC**

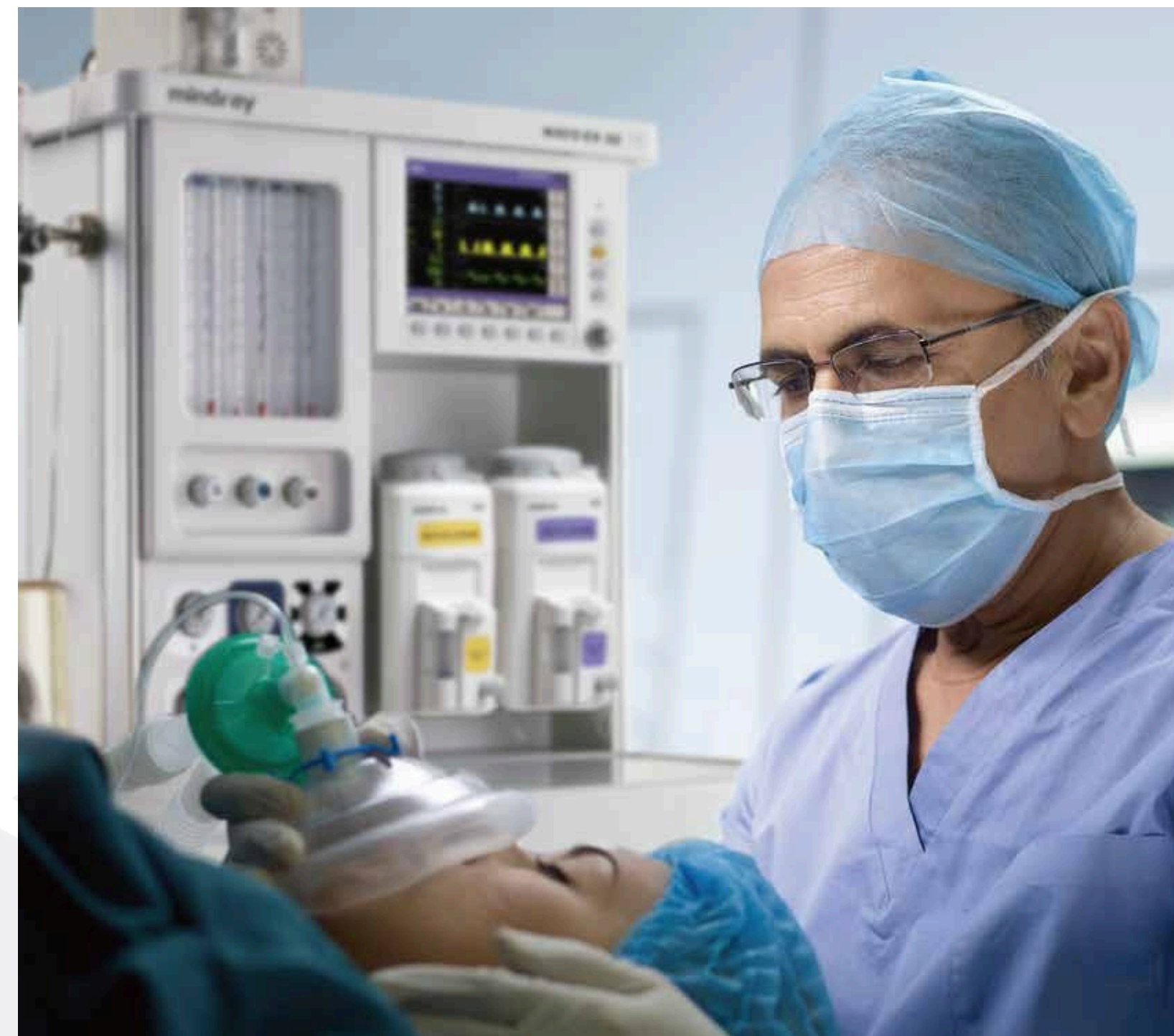

## WATO EX-30

Máquina de anestesia

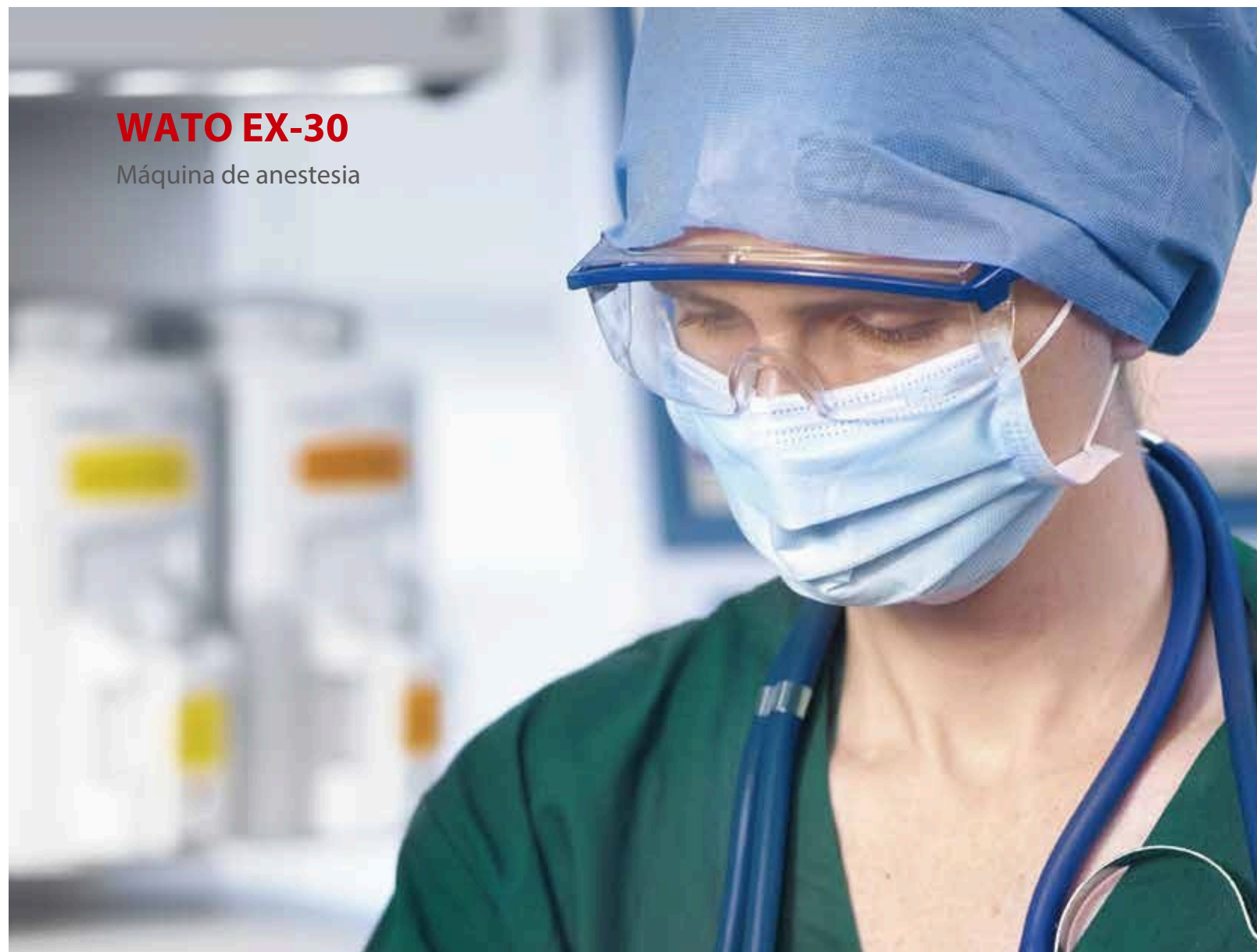

Un socio asequible para el personal clínico. Arraigada en la profunda comprensión de las necesidades clínicas, WATO EX-30 integra funciones completas, como los modos sincronizados por presión y volumen, así como un control y seguimiento de la capnografía, haciéndola una solución accesible.



### Clásico

Sus caudalímetros clásicos reducen la curva de aprendizaje, permitiendo un funcionamiento cómodo y de fácil manejo para el clínico. EX-30 puede configurarse con hasta 6 medidores de flujo de tubo de vidrio para aire, O<sub>2</sub> y N<sub>2</sub>O, que proporcionando ajustes de flujo de alta resolución.

### Fiable

Con un diseño patentado de tres sensores de flujo, el sistema de calefacción integrado, el circuito de respiración compacto y un ventilador de última generación, WATO EX-30 acompaña al anestesiólogo en un rol de socio confiable.

### Seguro

Wato EX-30 muestra información de capnografía directamente en el monitor del ventilador y, de esta forma, ofrece la forma más eficiente para el control del paciente.





# WATO EX-30

Máquina de anestesia



**El ventilador proporciona:** Modos de ventilación múltiples VCV / PCV / SIMV / PSV

**Pantalla color de 8.4 pulgadas:** Muestra simultáneamente dos formas de onda

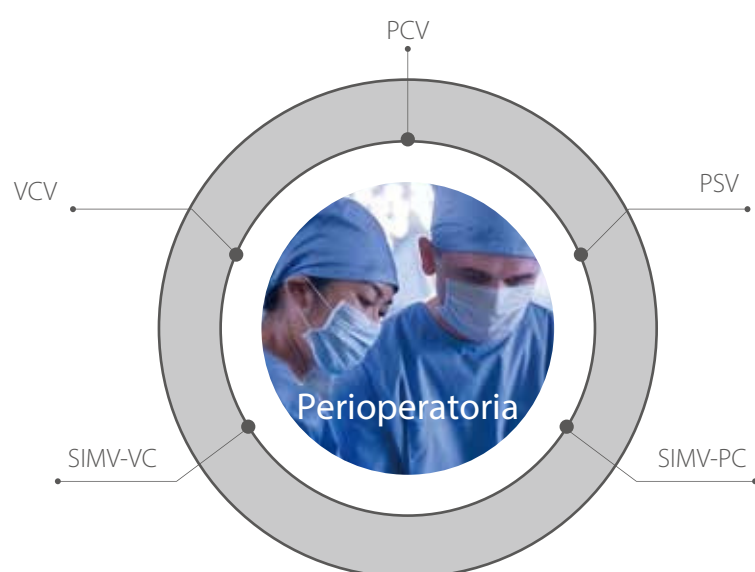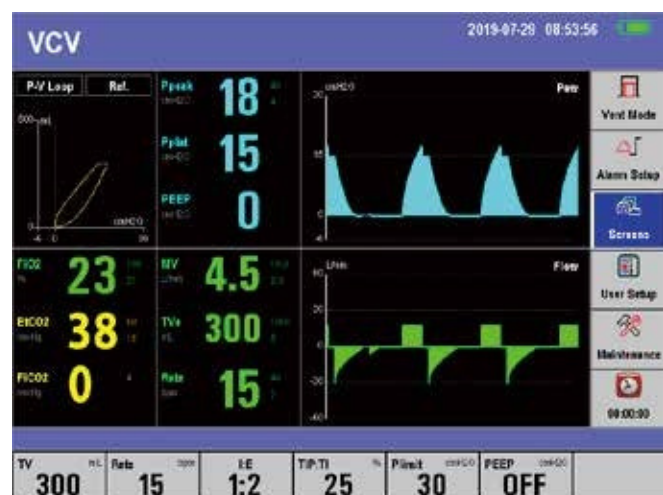

El circuito de respiración de diseño compacto con sistema de calefacción integrado presenta una resistencia más baja y menos condensación de agua



El módulo opcional de CO2 o los módulos Multi-Gas proveen un completo análisis respiratorio en tiempo real de FiO2, EtO2, CO2, N2O, detección automática de cinco agentes anestésicos.



El vaporizador Mindray compensa el flujo, la presión y la temperatura para ofrecer una concentración exacta del agente anestésico.



+52 5530479296



ventas@meditecjc.com



www.meditecjc.com