

Cuna Neonatal con música, balanza y ajustes ergonómicos

Medibaby Music



- Balanza.
- Agarradera móvil.
- Frenos de seguridad.
- Angulo de inclinación, 15°.
- Panel de control con teclado táctil.
- Medidor de temperatura ambiental.
- Reproductor de música en formato MP3.
- Altura ajustable por medio de sistema hidráulico.



¡Confort, tecnología y cuidado en una sola cuna: música, peso y seguridad para los más pequeños, con ajuste perfecto para cada necesidad!




» Estructura

Estructura de acero recubierto de electroforesis, base de ABS, columna perfilada de aluminio, lavabo para bebés de ABS · Pedal para ajustar la altura de la cuna (verde para movimiento hacia arriba, rojo para movimiento hacia abajo).

» Palanca para posición Trendelenburg

Palanca ubicada debajo de la pantalla LCD, tire de la palanca hacia afuera con sus figuras, luego sostenga la cuna para obtener la posición de Trendelenburg o la posición de Trendelenburg invertida.

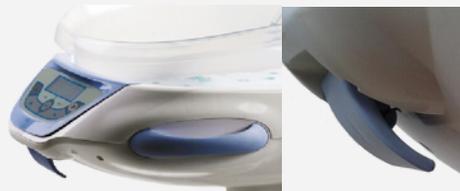


» Pantalla LCD

Instale la batería y encienda la pantalla LCD, la pantalla activa automáticamente la función de báscula de peso, se muestra el peso como se muestra a continuación, el peso es para el bebé o el objeto dentro del recipiente para bebés.

» Teclado

1. Botón "MODE", seleccione el modo de trabajo.
2. Botón "ATRÁS", reproduce la canción anterior en el estado de reproducción de música.
3. Botón "PAUSA", pausa y reproduce la canción en el estado de reproducción de música.
4. Botón "ADELANTE", reproduce la siguiente canción en el estado de reproducción de música.
5. Botón "POWER", para encender o apagar la pantalla .
6. Botón "Volumen+".
7. Botón "Volumen-".

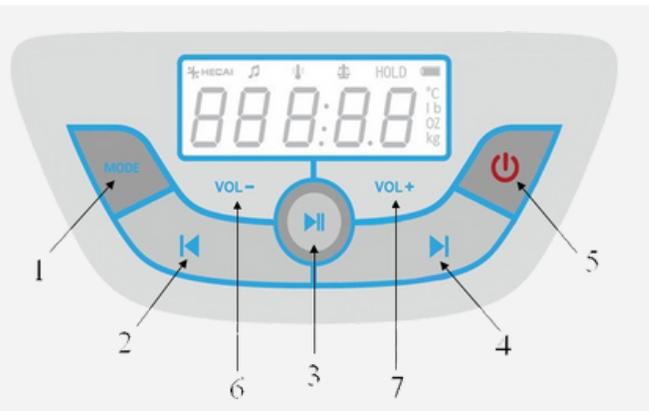

» Especificaciones técnicas

Dimensiones	800*420*855*1045mm
Altura	855*1045mm
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	15°
Dimensión del espacio para bebés	800*420 mm
Capacidad de carga	20 kg
Ruedas	4 unidades de 100mm

Todo lo que un recién nacido necesita: una cuna neonatal con música, balanza y ajustes ergonómicos para brindar confort y seguridad desde el primer día

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia bancaria

Efectivo



Pago con tarjeta 4.5% + IVA

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjyg.com



www.meditecjyg.com