



**MEDITEC**

# **CAMILLA PARA AMBULANCIA**

## **LUXURY RP-500**



***Segura,  
práctica y lista  
para actuar.***

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjg.com



www.meditecjg.com



## Especificaciones

- El material con el cual es fabricada es una aleación de aluminio reforzado de alta resistencia, con un tratamiento de pintura electrostática.
- Barandal plegable y esta equipado con dos cinturones de seguridad para garantizar la seguridad de los pacientes durante el transporte.
- El colchón hecho de poliuretano de alta densidad, sellado, a prueba de agua, con diseño ergonómico con una forma cóncava.
- Espesor de 10 cm.
- Equipado con doble pistón en las patas en dos etapas para elevación gradual de la camilla.
- Inclinação de 0 a 75° para que pueda acomodarse mejor el paciente.
- Cuenta con 4 ruedas de las cuales dos poseen freno.
- Tamaño de la rueda: 150 mm.

| Modelo              | RP-500           |
|---------------------|------------------|
| Dimensiones grales  | 195 x 57 x 91 cm |
| Dimensiones plegada | 195 x 57 x 28 cm |
| Capacidad de carga  | 200 kg           |
| Peso de la camilla  | 40 a 45 kg       |



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.





## Posiciones de la Camilla



## Características Adicionales



### Con pistón neumático

El respaldo esta controlado por un pistón neumático en la parte posterior, con el cual puede ajustar al ángulo deseado con solo presionar ligeramente.

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.





## Características Adicionales



### Ajuste del soporte de piernas

El soporte de las piernas se puede elevar mediante las palancas para ajustar la placa en la zona de la pantorrilla.

### Barandales laterales

El barandal lateral plegable evita que el paciente se caiga de la camilla y cause lesiones secundarias.




### Separación de la camilla

En la parte posterior de la camilla hay una palanca que al jalarla se puede separar la plataforma superior de la camilla.

### Con pistón neumático

El respaldo esta controlado por un pistón neumático en la parte posterior, con el cual puede ajustar al ángulo deseado con solo presionar ligeramente.

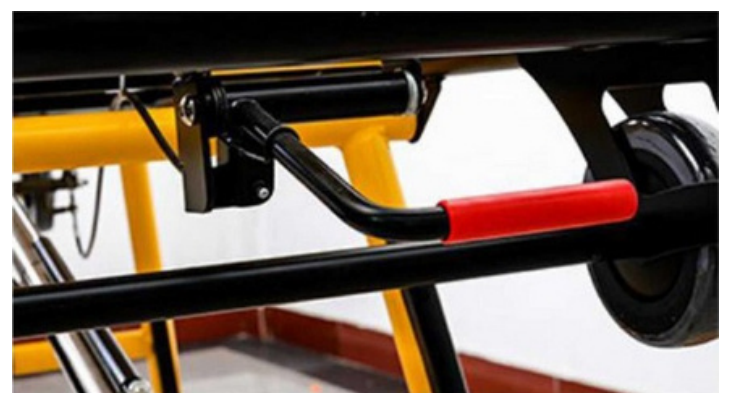

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.





## Características Adicionales



### Colchón

El colchón ergonómico con una forma cóncava proporciona apoyo al paciente, a la vez que minimiza los movimientos bruscos en el paciente y minimiza lesiones secundarias.

### Ruedas

La camilla posee 4 ruedas y son de 150 mm de diámetro y 2 de ellas poseen freno



**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.